

CM SLIM®



Conexão
Digital Implant

IDEAL PARA ESPAÇOS ESTREITOS, SUA PLATAFORMA
PROTÉTICA CM QUE GARANTE ESTABILIDADE E PRECISÃO

Short - 977006

Long - 977007




CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Rosca Interna: M 1.6

Principais Indicações

- Os implantes Slim Ø2,9 destinam-se a substituir um incisivo lateral na maxila e/ou incisivo central ou lateral na mandíbula
- Protocolo convencional e carga imediata

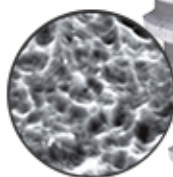

Torque de Instalação
recomendado de **45N.cm**



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente

Tratamento de Superfície POROUS®

Ø 2.9

- 523110 - 2,9x10
- 523111 - 2,9x11,5
- 523113 - 2,9x13
- 523115 - 2,9x15




MORSE INDEXADO

SLIM® SL

Ø2,9

Sonda
Gengival

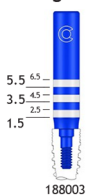

Healing Caps

Abutment

Transfer
Convencional
(gesso)

Scan Conect
Digital
(Peek Medical)

Análogos
(gesso/digital)

Parafusos


Provisórios

Cilindros
(copings)


Tampas de
Proteção

Unitária


UMD - Universal Modular
Digital

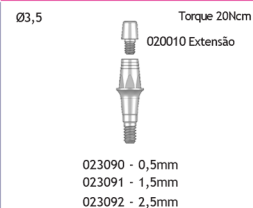

PB - Precision Base
Link



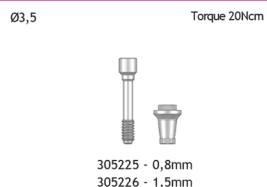


TiBase
Small

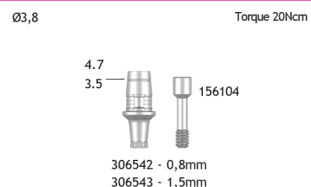

* Múltipla

Multi Base

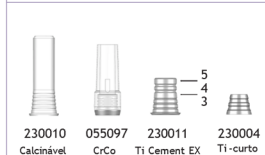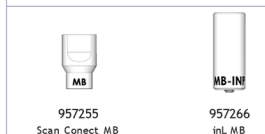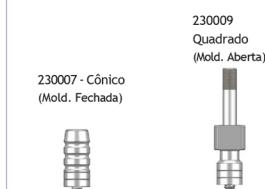

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - G.M 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• SC Scan Conect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• inL Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.



Conexão
Biblioteca Digital



www.conexao.com.br/bibliotecas