

FLEX GOLD® HE RD



Conexão
Digital Implant

PROJETADO PARA ALCANÇAR ALTA ESTABILIDADE PRIMÁRIA
EM TODAS AS DENSIDADES ÓSSEAS: MAXILA E MANDÍBULA

Short - 977000

Long - 9770001



CARACTERÍSTICAS

Implante híbrido de corpo único

- Hexágono Externo RD
- Região cervical: Cilíndrico
- Região apical: Cônico
- Permite sub-instrumentação
- Rosca Interna: M 2.0

Roscas duplas compactantes progressivas


- Aumenta a velocidade de instalação
- Aumenta a estabilidade primária

Ápice ativo

- Câmaras helicoidais autocortantes
- Ponta suavemente arredondada
- Estabiliza e harmoniza os tecidos ao redor

Superfície Porous

- Microgeometria com nano tecnologia
- Estimula a velocidade da osseointegração

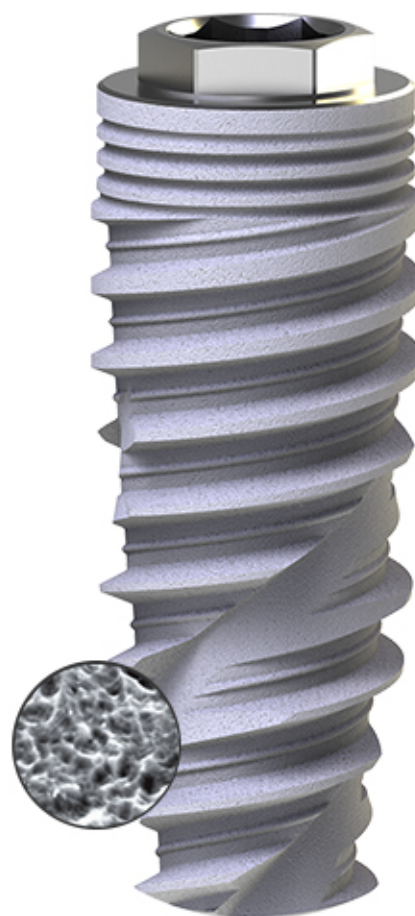

Torque de Instalação
recomendado de **60N.cm**



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente

Ø 3.5

537385 - 3,5x8,5

537310 - 3,5x10

537311 - 3,5x11,5

537313 - 3,5x13

537315 - 3,5x15

Ø 3.75

518785 - 3,75x8,5

518710 - 3,75x10

518711 - 3,75x11,5

518713 - 3,75x13

518715 - 3,75x15

Ø 4.3

537485 - 4,3x8,5

537410 - 4,3x10

537411 - 4,3x11,5

537413 - 4,3x13

537415 - 4,3x15

Ø 5.0


537585 - 5,0x8,5

537510 - 5,0x10

537511 - 5,0x11,5

537513 - 5,0x13

537515 - 5,0x15

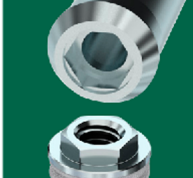

HEX. EXTERNO - FLEX GOLD® HE RD - Ø 3,5 - 3,75 - 4,3 - 5,0 | SHORT® HE RD - Ø4,3 - 5,0

EASY GRIP® HE RD - Ø3,75 - 4,0 - 5,0

exocad®

exocad® / inLab

Healing Caps

Ø4,5
115023 - 3,0mm
115024 - 4,0mm
115025 - 5,5mm
115027 - 7,0mm

Ø5,0
122023 - 3,0mm
122024 - 4,0mm
122025 - 5,5mm
122027 - 7,0mm

Abutment

	Múltipla			Unitária - Múltipla	Unitária - Múltipla	Unitária
	MB - Multi Base	MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone	UB - UCLA Base	TiBase Large
	Ø3,8 Torque 20Ncm	Ø4,8 Torque 20Ncm		Ø4,8 Torque 20Ncm	Ø4,5 Torque 30Ncm	Ø5,0 Torque 30Ncm
	 230030 - 1,0mm 230031 - 2,0mm 230032 - 3,0mm 230033 - 4,0mm	 Solid 132041 - 1,0mm 132042 - 2,0mm 132043 - 3,0mm 132044 - 4,0mm	 2 peças 132021 - 1,0mm 132022 - 2,0mm 132023 - 3,0mm 132024 - 4,0mm	 220020 022021 - 1,0mm 022022 - 2,0mm 022023 - 3,0mm	 Ucla Calcínvel Implante 056021 - acrílico c/ Hex 055021 - acrílico s/ Hex	 4.7 3.5 119024 Large L 306549 - 0,5mm 306550 - 1,5mm 306551 - 2,5mm 306788 - 1,5x6mm
Transfer Convencional (gesso)	 230009 - Quadrado (Mold. Aberta) 230007 - Cônico (Mold. Fechada)	 103000 Cônico (Mold. Fechada)	 094000 Quadrado (Mold. Aberta)	 100000 - Cônico (Mold. Fechada) 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)	 025020 (Mold. Aberta) Ø4,5mm	 057020 (Mold. Fechada) Ø5,0mm
Scan Conect Digital (Peek Medical)	 957255 Scan Conect MB	 957253 Scan Conect MU		 957259 c/ Hex Scan Conect EC	 957237 Scan Conect HE RD	 957258 - Large Scan Conect TBL
Análogos DG (Digital / Gesso)	 013411	 013410		 013414	 013403	 013416
Parafusos	Rosca 1.6 Torque 20Ncm  230003	Rosca 1.4 Torque 20Ncm  157004 p/ Metal  158004 Fenda p/ Metal  020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia	Rosca 1.4  011004	Rosca 1.4 Torque 20Ncm  011004	Rosca 2.0  Hexagonal 119024	 Quadrado 121024 Torque máximo 30Ncm
Provisórios	 230006 Titânio múltiplos	 159004 Titânio múltiplos		 112004 - Titânio s/ Hex múltiplos  170004 - Titânio c/ Hex unitário	 137024 - Titânio c/ Hex unitário 008024 - Titânio s/ Hex múltiplos	 Base Digital 9 306804 7 HE RD Ti Cement E 5 Rotacional 4
Cilindros (copings)	 055097 CrCo  230004 Ti - curto  230011 Ti Cement EX  230010 Calcínvel  230005 Ti - longo	 144001 - Calcínvel  055096 - CrCo Cromo-Cobalto  144004 Ti Laser  036001 Ti Cement  144008 Ti Cement EX	 * Utilizar parafuso fenda  5 4*  7 5 4*	 Acrílico 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex  Ti Cement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex  CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex	 Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Ncm  205021 - 1,0mm 205022 - 2,0mm 205023 - 3,0mm 205024 - 4,0mm  203200 - Esp. O' Ring 203000 - Esp. Micro  208000 - Anel Esp. 207000 - Micro Anel  203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula  201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring	 Barra Clips  Ø2,0 x 25mm  200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio
Tampas de Proteção	 230002	 095000		 098000		

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• SC Scan Conect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• inL Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

Unitária - Múltipla
Scan inL Sirona® inLab
Micro Unit Mini Pilar
 Rosca 1.4 157004  MU-in 957267 inL MU  035001 Ti Cement inL
Multi Base
 Rosca 1.6 230003  MB-IN 957266 230004 230005 inL MB Ti-curto Ti-longo
TiBase L
 957058 - Large / white 957060 - Large / grey
DentalCAD
Conexão Biblioteca Digital
