

TORQ[®] NP



Conexão
Digital Implant

DESIGN INOVADOR PARA UMA INSERÇÃO RÁPIDA E PRECISA, COM TECNOLOGIA QUE GARANTE COMPACTAÇÃO ÓSSEA E DISSIPAÇÃO DE FORÇAS

Short - 977004

Long - 977005



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Colar reduzido para aumentar a espessura óssea na cervical do implante
- Espiras com alto poder de corte
- Angulação Interna: 24°
- Rosca interna M 1.6
- Web® (ampliação do contato ósseo)
- Bioplatform® (tipo switch)

Principais Indicações

- Implantações unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação dupla, maxila e mandíbula

Tratamento de Superfície VULCANO[®]

Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
545385 - 3,5x8,5	545785 - 3,75x8,5	545285 - 4,0x8,5	545585 - 5,0x8,5
545310 - 3,5x10	545710 - 3,75x10	545210 - 4,0x10	545510 - 5,0x10
545311 - 3,5x11,5	545711 - 3,75x11,5	545211 - 4,0x11,5	545511 - 5,0x11,5
545313 - 3,5x13	545713 - 3,75x13	545213 - 4,0x13	545513 - 5,0x13
545315 - 3,5x15	545715 - 3,75x15		



Torque de Instalação
recomendado de **60N.cm**



Hard[®]

Titânio Hard[®] 955(MPa)
73% + resistente

Tratamento de Superfície POROUS[®]

Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
525385 - 3,5x8,5	525785 - 3,75x8,5	525285 - 4,0x8,5	525585 - 5,0x8,5
525310 - 3,5x10	525710 - 3,75x10	525210 - 4,0x10	525510 - 5,0x10
525311 - 3,5x11,5	525711 - 3,75x11,5	525211 - 4,0x11,5	525511 - 5,0x11,5
525313 - 3,5x13	525713 - 3,75x13	525213 - 4,0x13	525513 - 5,0x13
525315 - 3,5x15	525715 - 3,75x15		

MORSE INDEXADO 24° - FLEX GOLD® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,3 - 5,0 | SHORT® NP - Ø3,75 - 4,3

FLASH® NP - Ø3,5 - 4,3 - 5,0


TORQ® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,0 - 5,0



exocad®

exocad® / inLab

Sonda Gengival
Healing Caps

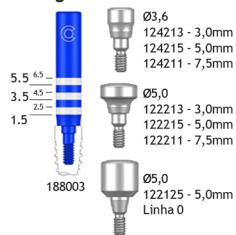

Abutment

Múltipla			Unitária - Múltipla		Unitária	Unitária - Múltipla		Unitária			
MB - Multi Base		MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone		UMD - Universal Modular Digital		UB - UCLA Base CrCo		TiBase Small Large	
Ø3,8	Torque 30Ncm	Ø4,8	Torque 30Ncm	Ø4,8	Torque 30Ncm	Ø3,5	Torque 30Ncm	Ø3,8	Torque 30Ncm	Ø3,8	Torque 30Ncm Ø4,5
230009 - Quadrado (Mold. Aberta)											
230007 - Cônico (Mold. Fechada)		103000 Cônico (Mold. Fechada)		094000 Quadrado (Mold. Aberta)		023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex)		021001 Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)		957274 (Mold. Aberta) Transfer Scan TS (Ti)	
				100000 - Cônico (Mold. Fechada)		023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex)		026103 (Mold. Aberta) Ø3,6mm		028103 (Mold. Fechada) Ø3,6mm	
				167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)						028105 (Mold. Fechada) Ø4,6mm	
013411		013410		013414		013412		013401		013415 Small 013416 Large	
Rosca 1.6	Torque 20Ncm	Rosca 1.4	Torque 20Ncm	Rosca 1.4	Torque 20Ncm	Rosca 1.4	Torque 20Ncm	Rosca 1.6			Torque 30Ncm
230002		095000		098000		099405		Pilar O' Ring		Barra Clips	
								Ø4,0 Torque 30Ncm		Ø2,0 x 25mm	
								203200 - Esp. O'Ring		200100 - Clip Reto	
								203000 - Esp. Micro		200200 - Clip 35graus	
								208000 - Anel Esp.		200300 - Clip 70graus	
								207000 - Micro Anel		204000 - Barra Acrílico	
								203300 - Cápsula O' Ring		400204 - Barra Titânio	
								203100 - Micro Cápsula			
								201000 - Anel O' Ring			
								202000 - Micro O' Ring			


IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - G.M 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• SC Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• inL Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.


www.conexao.com.br/bibliotecas

Scan inL
Sirona® inLab

Micro Unit
Mini Pilar

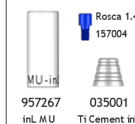

Multi Base

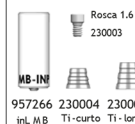

TiBase S



TiBase L



DentalCAD

Conexão
Biblioteca Digital

